



扫码关注公众号



杭州华安生物技术有限公司

☎ 0571-88062880

☎ 0571-88060400

✉ sales@huabio.cn

📍 杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化园区2号楼16层




# 纳米抗体解决方案 Nanobody Solution

·从靶点鉴定到转化研究的  
完整纳米抗体工具箱

## 让研究变得简单

 华安生物  
H U A B I O

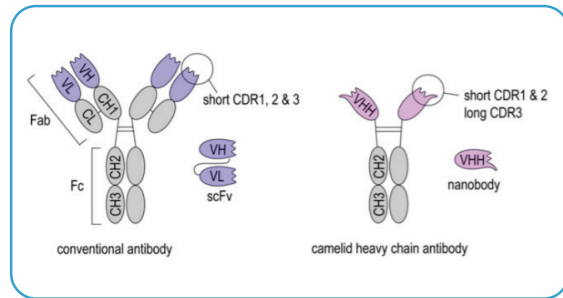

组织穿透力强，稳定性高

高亲和力，高特异性

高批次间一致性

应用场景预验证

## 热销纳米抗体产品

华安生物（HUABIO）的VHH产品系列主要包括：Nanoselector纳米磁珠、标签特异性纳米抗体、纳米二抗、重组纳米二抗、Smart Booster信号增强系统等。

• Nanoselector  
• IP纳米二抗

• 纳米二抗  
• 重组纳米二抗  
• WB纳米二抗  
• Smart Booster  
• 纳米流式二抗

• 标签纳米抗体  
• 重组标签纳米抗体



蛋白相互作用与功能  
研究方案


超高灵敏度检测  
与成像方案

重组蛋白与标签  
系统方案

扫码了解更多  
纳米产品信息

## Nanoselector纳米磁珠

Nanoselector系列产品是专为快速、可靠、高效的一步法免疫沉淀而设计的理想工具。该产品由与磁珠共价偶联的VHH构成，确保在下游凝胶电泳与质谱分析中无抗体轻重链污染。

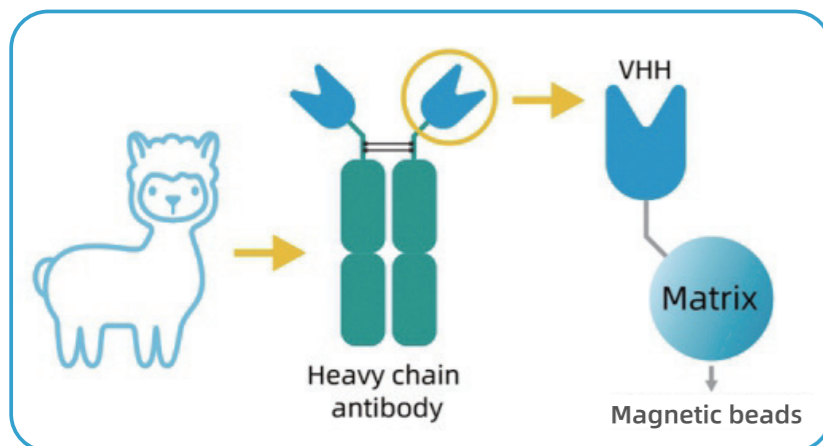

### 核心应用场景

01 免疫沉淀（IP）/免疫共沉淀（Co-IP）

02 蛋白质谱分析

03 染色质免疫沉淀（ChIP）/RNA结合蛋白免疫沉淀（RIP）

04 磁珠酶活性检测

### 核心产品优势




01 无轻重链污染：彻底消除抗体轻重链对下游WB及质谱结果的干扰

02 结果稳定可靠：批次间一致性高，重复性优异

03 超高亲和力：解离常数低至pM级别

04 孵育时间极短：5-30分钟快速结合

### 明星产品展示

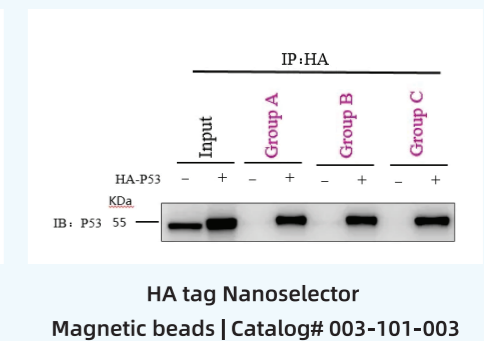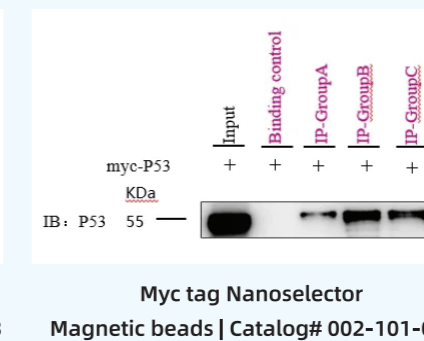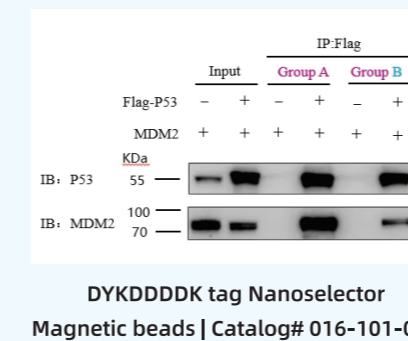

### 热销IP/Co-IP配套产品推荐

Nanoselector			
Code number	Product description	Applications	Target species
019-101-003	GFP Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	GFP
020-101-003	RFP Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	RFP
013-101-003	mNeongreen Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	mNeongreen
014-101-003	TurboGFP Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	TurboGFP
015-101-003	MBP Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	MBP
010-101-003	GST Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	GST
011-101-003	SNAP tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	SNAP tag
012-101-003	Halo Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Halo
003-101-003	HA tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	HA tag
004-101-003	c-His tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	c-His tag
049-101-003	mWasabi Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	mWasabi
017-101-003	TagFP Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	TagFP
025-101-003	Rabbit IgG Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Rabbit
001-101-003	Mouse IgG Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Mouse
001-300-003	Mouse IgG&Rabbit IgG Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Mouse&Rabbit

## Nanoselector

Code number	Product description	Applications	Target species
067-101-003	Streptavidin Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Biotin
100-100-200	Binding Control Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Binding Control
064-101-003	V5 tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	V5 tag
086-101-003	Spycatcher Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	SpyTag
086-102-003	Spycatcher003 Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	SpyTag003
086-103-003	Dogcatcher Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	DogTag
082-101-003	StayGold/mBaojin Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	StayGold/mBaojin
016-101-003	DYKDDDDK tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	DYKDDDDK tag
023-101-003	Human IgG Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Human
026-101-003	tdTomato Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	tdTomato
028-101-003	mScarlet3-H/mYongHong Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	mScarlet
078-101-003	Biotin Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Biotin
067-102-003	Streptavidin Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Biotin
006-101-003	SUMO tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	SUMO tag
061-101-003	mGold Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	mGold
002-101-003	Myc tag Nanoselector Magnetic beads	IP,CHIP,MS,Purification	Myc tag

## IP Nano-secondary Antibody

Code number	Product description	Applications	Target species
001-100-005	Anti-Mouse IgG for IP, AlpSdAbs®VHH(HRP)	WB	Mouse
025-100-005	Anti-Rabbit IgG for IP, AlpSdAbs®VHH(HRP)	WB	Rabbit
001-180-005	Anti-Mouse&Rabbit Light chain for IP, AlpSdAbs® VHH(HRP)	WB	Mouse&Rabbit
001-190-005	Anti-Mouse&Rabbit Heavy chain for IP, AlpSdAbs® VHH(HRP)	WB	Mouse&Rabbit

扫码了解更多  
“IP/Co-IP”  
配套产品信息



## 标签特异性纳米抗体

标签纳米抗体是针对各类标签蛋白的一系列产品（如His、HA、Flag、Myc、GST、Halo、GFP、RFP、StayGold/mBaojin等）。该系列基于源自羊驼重链可变区的单域抗体，为您提供多样化的高性能抗体选择。

## 应用场景


融合蛋白检测、纯化、成像及结构研究。

## 明星产品展示

Anti-StayGold/mBaojin纳米抗体是针对新型超稳定荧光蛋白StayGold/mBaojin开发，可实现**超高亲和力与特异性的识别**。其小尺寸最大限度减少对融合蛋白功能的干扰，是**活细胞长时程超高分辨率成像与蛋白质互作研究的理想工具**。

验证应用：WB, ICC/IF, ELISA, IP, Flow Cyt.

## Anti-StayGold/mBaojin, AlpHcAbs® Rabbit antibody | 082-201-001

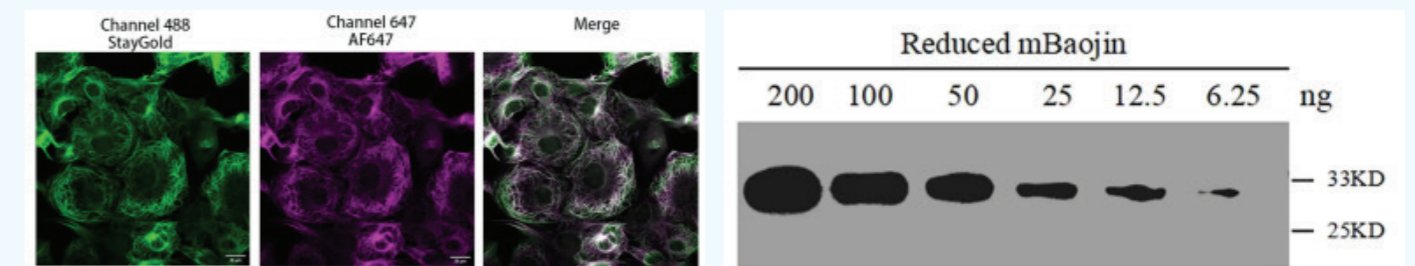

IF-Cell staining with StayGold-Enscnoin transfected COS-7 cells  
数据来源：西湖大学，Zhang Lab（客户验证数据）

WB analysis on different amount of mBaojin  
（内部验证数据）

## 热销纳米标签抗体推荐

## Flag

Code number	Product description	Applications	Target species
016-303-005	Anti-DYKDDDDK tag, AlpHcAbs® Mouse antibody(HRP)	WB,ELISA	DYKDDDDK tag
016-203-001	Anti-DYKDDDDK tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	DYKDDDDK tag
016-303-007	Anti-DYKDDDDK tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody(iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	DYKDDDDK tag
016-303-008	Anti-DYKDDDDK tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody(iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	DYKDDDDK tag
016-303-009	Anti-DYKDDDDK tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody(iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	DYKDDDDK tag

## HA

Code number	Product description	Applications	Target species
003-201-005	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	HA tag
003-301-005	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2a antibody(HRP)	WB,ELISA	HA tag
003-301-007	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2a antibody(iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	HA tag

HA			
Code number	Product description	Applications	Target species
003-301-008	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2a antibody(iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	HA tag
003-301-009	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2a antibody(iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	HA tag
003-501-001	Anti-HA tag, AlpHcAbs® Human antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	HA tag
GFP			
Code number	Product description	Applications	Target species
019-301-001	Anti-GFP, AlpHcAbs® Mouse antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	GFP
019-301-004	Anti-GFP, AlpHcAbs® Mouse antibody(Biotin)	WB,ELISA,IP	GFP
Myc			
Code number	Product description	Applications	Target species
002-203-005	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	Myc tag
002-323-001	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Myc tag
002-203-007	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Myc tag
002-203-008	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Myc tag
002-203-009	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Myc tag
002-503-001	Anti-Myc tag, AlpHcAbs® Human antibody	WB,ELISA,IP,ICC/IF,Flow Cyt	Myc tag
His			
Code number	Product description	Applications	Target species
004-202-005	Anti-His tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	His tag
004-202-007	Anti-His tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	His tag
004-202-008	Anti-His tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	His tag
004-202-009	Anti-His tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	His tag
004-322-001	Anti-His tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	His tag
GST			
Code number	Product description	Applications	Target species
010-201-001	Anti-GST, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	GST
010-201-005	Anti-GST, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	GST
Halo			
Code number	Product description	Applications	Target species
012-201-001	Anti-Halo tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	Halo tag
012-201-005	Anti-Halo tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	Halo tag

mNeongreen			
Code number	Product description	Applications	Target species
013-201-001	Anti-mNeongreen, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	mNeongreen
013-201-005	Anti-mNeongreen, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	mNeongreen
turboGFP			
Code number	Product description	Applications	Target species
014-201-001	Anti-turboGFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody	ELISA,IP	turboGFP
014-201-005	Anti-turboGFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	ELISA	turboGFP
MBP			
Code number	Product description	Applications	Target species
015-201-001	Anti-MBP, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	MBP
015-201-005	Anti-MBP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	MBP
TagFP			
Code number	Product description	Applications	Target species
017-203-001	Anti-TagFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	TagFP
017-203-004	Anti-TagFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(Biotin)	WB,ELISA,IP	TagFP
017-203-005	Anti-TagFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	TagFP
RFP			
Code number	Product description	Applications	Target species
020-201-001	Anti-RFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ELISA,IP	RFP
020-201-004	Anti-RFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(Biotin)	WB,ELISA,IP	RFP
020-201-005	Anti-RFP, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	RFP
V5			
Code number	Product description	Applications	Target species
064-201-005	Anti-V5 tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	V5 tag
064-321-001	Anti-V5 tag, AlpHcAbs® Mouse IgG2b antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	V5 tag
064-201-007	Anti-V5 tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	V5 tag
064-201-008	Anti-V5 tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	V5 tag
064-201-009	Anti-V5 tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	V5 tag
Strep-tag			
Code number	Product description	Applications	Target species
062-203-001	Anti-Strep-tag II, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Strep-tag II
062-203-004	Anti-Strep-tag II, AlpHcAbs® Rabbit antibody(Biotin)	WB,ELISA,IP	Strep-tag II
062-203-005	Anti-Strep-tag II, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	Strep-tag II

## StayGold/mBaojin

Code number	Product description	Applications	Target species
082-201-001	Anti-StayGold/mBaojin, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	StayGold/mBaojin
082-201-004	Anti-StayGold/mBaojin, AlpHcAbs® Rabbit antibody(Biotin)	WB,ELISA,IP	StayGold/mBaojin
082-201-005	Anti-StayGold/mBaojin, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	StayGold/mBaojin
082-301-001	Anti-StayGold/mBaojin, AlpHcAbs® Mouse IgG1 antibody	ICC/IF,Flow Cyt,WB,Elisa,IP	StayGold/mBaojin

## mScarlet

Code number	Product description	Applications	Target species
028-201-005	Anti-mScarlet3-H/mYongHong, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	mScarlet
028-201-007	Anti-mScarlet3-H/mYongHong, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	mScarlet
028-201-008	Anti-mScarlet3-H/mYongHong, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	mScarlet
028-201-009	Anti-mScarlet3-H/mYongHong, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	mScarlet

## tdTomato

Code number	Product description	Applications	Target species
026-201-001	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Rabbit antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	tdTomato
026-201-005	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	tdTomato
026-201-007	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	tdTomato
026-201-008	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	tdTomato
026-201-009	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	tdTomato
026-301-001	Anti-tdTomato, AlpHcAbs® Mouse IgG1 antibody	ICC/IF,Flow Cyt,WB,Elisa,IP	tdTomato

## SUMO tag


Code number	Product description	Applications	Target species
006-201-005	Anti-SUMO tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(HRP)	WB,ELISA	SUMO tag
006-201-007	Anti-SUMO tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	SUMO tag
006-201-008	Anti-SUMO tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	SUMO tag
006-201-009	Anti-SUMO tag, AlpHcAbs® Rabbit antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	SUMO tag

扫码了解更多  
“纳米标签抗体”  
产品信息



## 纳米二抗

纳米二抗是针对不同种属免疫球蛋白的一系列产品（如小鼠、兔、人、食蟹猴、大鼠、羊、羊驼等）。该系列同样基于羊驼重链来源的单域抗体技术，为您提供卓越的检测与信号放大解决方案。

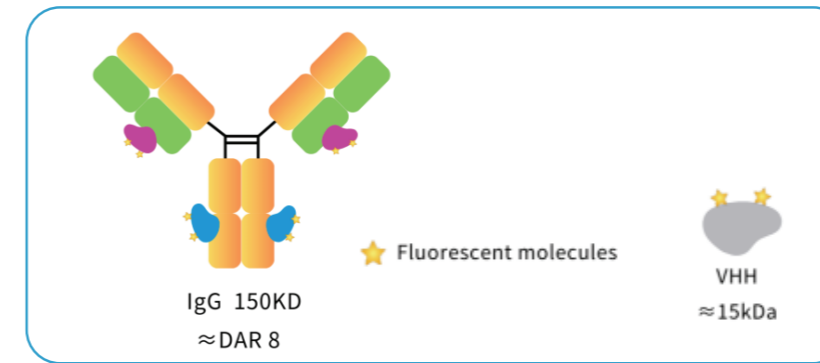

## 核心应用场景

- 01 超高分辨率显微成像
- 02 低丰度蛋白流式/WB检测
- 03 复杂组织多重免疫荧光分析

## 核心产品优势

- 01 超低背景与超高信噪比
- 02 卓越的穿透性与染色均一性
- 03 卓越的稳定性与适用性
- 04 卓越的多重荧光检测兼容性


## WB纳米二抗

基于纳米抗体（Nanobody, 15 kDa）技术平台，华安生物（HUABIO）提供的WB纳米二抗，其核心优势在于：

- 01 卓越的检测灵敏度，适用于低丰度与高分子量蛋白检测
- 02 与一抗实现共孵育，简化流程，节省WB时间≥2h
- 03 避免种属交叉反应，避免轻重链干扰，满足不同实验场景的需求
- 04 高标记密度与稳定性，保证实验结果可重复性

Code number	Product description	Applications	Target species
001-200-005	Anti-Mouse IgG for WB, AlpSdAbs® VHH(HRP)	WB	Mouse
001-300-005	Anti-Mouse IgG&Rabbit IgG for WB,AlpSdAbs® VHH(HRP)	WB	Mouse&Rabbit
025-200-005	Anti-Rabbit IgG for WB, AlpSdAbs® VHH(HRP)	WB	Rabbit

## WB纳米二抗实验流程

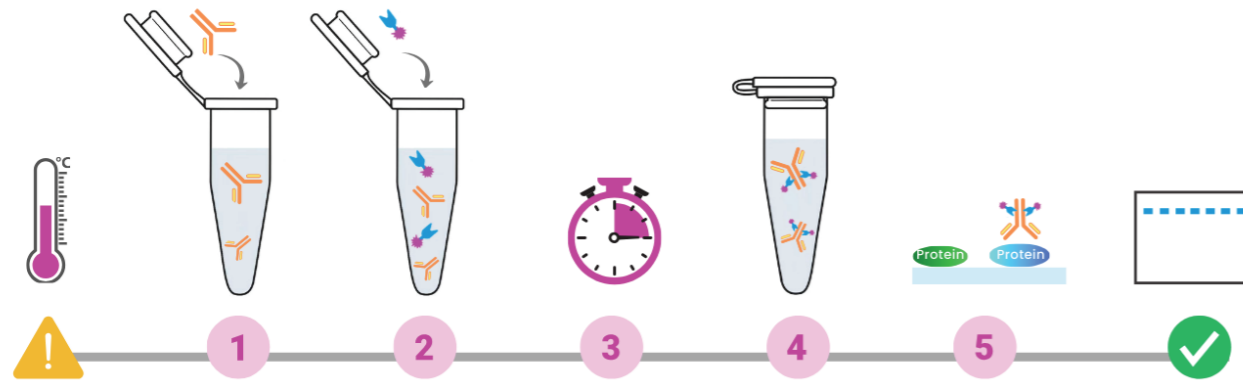

## Standard Workflow

⚠ Before you begin, equilibrate all reagents to room temperature.

1 Add 1ul primary antibody.

2 Add 1ul For WB Nano-Secondary Antibody\*.

3 Mix gently and incubate for 10 minutes at room temperature.

4 The antibody is now ready to be used.

5 Dilute the ready antibody and incubate with your blocked membrane.

6 Wash and Detection.

\*If the dosage of primary antibody is increased, please increase the dosage of secondary antibody correspondingly. Maintain the ratio of primary antibody to secondary antibody.

## 热销纳米二抗产品推荐

## Mouse IgG(H+L)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-401-005	Anti-Mouse IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse
001-401-007	Anti-Mouse IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse
001-401-008	Anti-Mouse IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse
001-401-009	Anti-Mouse IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse

## Mouse IgG(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-402-001	Anti-Mouse IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Mouse
001-402-005	Anti-Mouse IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse
001-402-007	Anti-Mouse IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-402-008	Anti-Mouse IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-402-009	Anti-Mouse IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse

## Mouse IgG1(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-408-001	Anti-Mouse IgG1(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Mouse
001-408-005	Anti-Mouse IgG1(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse

## Mouse IgG1(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-408-007	Anti-Mouse IgG1(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-408-008	Anti-Mouse IgG1(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-408-009	Anti-Mouse IgG1(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse

## Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-403-001	Anti-Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Mouse
001-403-005	Anti-Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse
001-403-007	Anti-Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-403-008	Anti-Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-403-009	Anti-Mouse IgG2a(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse

## Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
001-404-001	Anti-Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Mouse
001-404-005	Anti-Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse
001-404-007	Anti-Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-404-008	Anti-Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse
001-404-009	Anti-Mouse IgG2b(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Mouse

## Mouse kappa

Code number	Product description	Applications	Target species
001-406-001	Anti-Mouse kappa, AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Mouse
001-406-005	Anti-Mouse kappa, AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Mouse
001-406-007	Anti-Mouse IgG kappa, AlpHcAbs® Goat antibody( iFluor488)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse
001-406-008	Anti-Mouse IgG kappa, AlpHcAbs® Goat antibody( iFluor594)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse
001-406-009	Anti-Mouse IgG kappa, AlpHcAbs® Goat antibody( iFluor647)	WB,ICC/IF,ELISA,Flow Cyt	Mouse

## Rabbit IgG(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
025-401-001	Anti-Rabbit IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Rabbit
025-401-005	Anti-Rabbit IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,IHC,ELISA	Rabbit
025-401-007	Anti-Rabbit IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit
025-401-008	Anti-Rabbit IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit
025-401-009	Anti-Rabbit IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit

## Rabbit IgG(H+L)

Code number	Product description	Applications	Target species
025-402-005	Anti-Rabbit IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Rabbit
025-402-007	Anti-Rabbit IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit
025-402-008	Anti-Rabbit IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit
025-402-009	Anti-Rabbit IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rabbit

## Rabbit IgG(Fab Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
025-403-001	Anti-Rabbit IgG(Fab Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Rabbit
025-403-005	Anti-Rabbit IgG(Fab Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Rabbit

## Rabbit IgG Kappa

Code number	Product description	Applications	Target species
025-404-001	Anti-Rabbit IgG kappa, AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ICC/IF,ELISA,IP,Flow Cyt	Rabbit
025-404-005	Anti-Rabbit IgG kappa, AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Rabbit

## Rat IgG(H+L)

Code number	Product description	Applications	Target species
071-401-001	Anti-Rat IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat
071-401-005	Anti-Rat IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	ELISA,WB	Rat
071-401-007	Anti-Rat IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat
071-401-008	Anti-Rat IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat
071-401-009	Anti-Rat IgG(H+L), AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat

## Rat IgG(Fcy Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
071-402-001	Anti-Rat IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat
071-402-005	Anti-Rat IgG(Fcy Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	ELISA,WB	Rat

## Rat IgG(Fab Fragment specific)

Code number	Product description	Applications	Target species
071-403-001	Anti-Rat IgG(Fab Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Rat
071-403-005	Anti-Rat IgG(Fab Fragment specific), AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	ELISA,WB	Rat

## Chicken IgY

Code number	Product description	Applications	Target species
024-401-001	Anti-Chicken IgY, AlpHcAbs® Goat antibody	WB,ELISA	Chicken
024-401-005	Anti-Chicken IgY, AlpHcAbs® Goat antibody(HRP)	WB,ELISA	Chicken

## Chicken IgY

Code number	Product description	Applications	Target species
024-401-007	Anti-Chicken IgY, AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor488)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Chicken
024-401-008	Anti-Chicken IgY, AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor594)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Chicken
024-401-009	Anti-Chicken IgY, AlpHcAbs® Goat antibody(iFluor647)	ELISA,WB,ICC/IF,Flow Cyt	Chicken

扫码了解更多  
“纳米二抗”  
产品信息



